

石川県立中央病院 呼吸器内科 医師 _____ 宛

吸入手順書（ディスクス）
 （製品名： アドエア・フルタイム・セレVENT）

患者氏名； _____ (ID； _____) 薬局名； _____


指導日； _____ 年 _____ 月 _____ 日 薬剤師氏名； _____

※操作は薬剤を平らにもって実施してください
 ※ 吸入トレーナー、乳糖入り吸入練習用具で吸入感 吸い残しなどでの確認も可能です。

（原則、練習用吸入器等を用い評価欄に結果を記入しながら順に指導をしてください） ○良好 △継続指導が必要 ×できない


1 吸入の準備	評価
カウンターで残量を確認します	
カバーを「カチリ」と音がするまでカバーを開けます	
レバーを「カチリ」と音がするまで押します	
2 息吐き	評価
軽く息を吐き出します (吸入口には息を吹きかけないでください)	
3 吸入	評価
吸入口全体をしっかりとくわえ、舌を下げた状態（『ホー』と言うときの舌をイメージ）で、深く吸い込みます	
4 息どめ	評価
吸入口から口を離し5秒程度、止めます	
5 息吐き	評価
鼻から息をゆっくり吐き出します	
6 後片付け	評価
グリップに親指をあて、カチリと音がするところまで、回し戻してカバーを閉じてください（レバーもいっしょに元の位置に戻ります）。	
7 うがい	評価
吸入後は必ずうがいを3回します。	
その他の確認	評価
残量の確認方法が理解できた	
用法用量を理解できた	
定期吸入を継続することの大切さを理解できた	

※薬剤によってカバーの色が違います

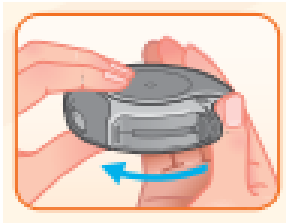

※指導後、表面のみ石川県立中央病院へFAXし、原本は患者様にお渡しください。

参考

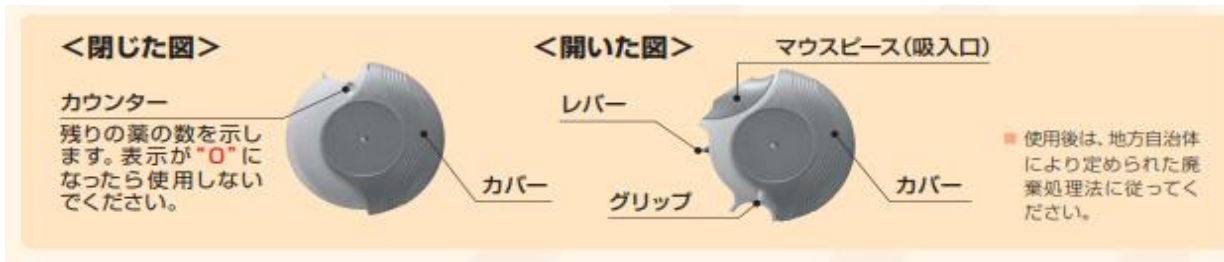

吸入の確認について

薬が吸入されるとわずかな甘みや粉の感覚を口の中に入ります。しかし、薬の量のごくわずかであるため、甘みを感じない(吸入感を得られない)場合もあります。また、体調によっても感じない場合があります。

- ◆**吸入できたかどうかの確認**:1回吸入した後、カバーを閉じる前に、吸入口の先をテーブルに置いた紙(できれば黒い紙)の上でトントン叩いて、お薬が出てこなければ正しく吸入できています。
- ◆**お薬が充填されていることの確認**:カバーを開けた後レバーを押し、吸入せずにテーブルに置いた紙(できれば黒い紙)にトントン叩くと、お薬が出てくることを確認できます。1回分のお薬が無駄になることをご理解の上、この確認作業をしてください。確認作業終了後は破棄してください。

パソコン、携帯電話から動画による吸入法などもご覧いただけます。

▶ <http://kusurigsk.jp/pc/index.html>

2次元コードが読み取れない場合は、インターネットに上記アドレスを直接ご入力ください。



ディスクの使い方のお問い合わせは

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0120-562-306

(9:00~17:45/土日祝日および当社休業日を除く)

アドエア®



フルタイム®



セレベント®

